

ALIMENTACIÓN POR SONDA CON BOMBA



Hay una variedad de métodos para administrar la alimentación por sonda. La alimentación con bomba mueve la fórmula a través de la sonda de alimentación hacia el estómago o el intestino delgado a una velocidad controlada mediante una bomba electrónica.

PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Siga estos pasos para preparar la alimentación por sonda:

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón
2. Limpie las superficies de trabajo
3. Reúna el equipo:
 - Fórmula
 - Bolsa de alimentación con bomba, bomba o conjunto de bombas
 - Jeringa de 30 ml a 60 ml
 - Paño limpio
 - Agua del grifo o embotellada
4. Marque el recipiente con la hora y la fecha

COLOQUE CORRECTAMENTE SU CUERPO ANTES DE COMENZAR

- NO se acueste durante la alimentación
- Mantenga la cabeza levantada a 30 grados o más mientras se administra la alimentación por sonda
- Espere una hora después de la alimentación antes de acostarse




DURANTE LA ALIMENTACIÓN CON BOMBA

1. Llene la bolsa de alimentación con bomba con la cantidad indicada de fórmula, cierre bien la tapa, luego cuelgue la bolsa en un gancho, poste intravenoso o colóquela en una mochila de alimentación por sonda
2. Cargue el equipo de alimentación en la bomba siguiendo las instrucciones del fabricante de la bomba
3. Prepare el equipo de alimentación, el cual elimina el aire de la línea, siguiendo las instrucciones del fabricante
4. Conecte el equipo de alimentación a la sonda de alimentación
5. Consulte el manual del usuario de la bomba para obtener información completa sobre la programación de la bomba
6. Encienda la bomba y ajuste la velocidad de flujo

Nota:

- Las bombas de la alimentación por sonda para uso doméstico son portátiles y se pueden colocar en mochilas compatibles para salir de casa
- Pregunte a su profesional de atención médica sobre el cuidado del equipo de alimentación entre las administraciones.

ALIMENTACIÓN CON BOMBA

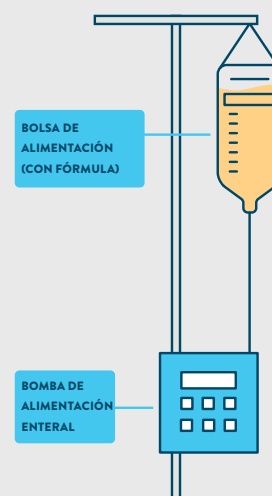


DESPUÉS DE LA ALIMENTACIÓN POR SONDA

Lave la sonda de alimentación después de cada alimentación, después de y entre cada medicamento, o según las indicaciones de su profesional de atención médica. Este paso es importante para mantener limpio el interior de la sonda y evitar obstrucciones.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

1. Lávese las manos con agua tibia y jabón
2. Coloque la punta de la jeringa en una taza con agua y tire del émbolo hasta llenar la jeringa con 30 ml de agua (o la cantidad de agua que su proveedor de atención médica le haya recetado para el lavado de la sonda)
3. Conecte la jeringa a la sonda de alimentación, abra la abrazadera de la sonda (si hay una abrazadera), e inyecte lentamente el agua en la sonda de alimentación
4. Repita hasta que se introduzca la cantidad deseada de agua a través de la sonda
5. Retire la jeringa de la sonda de alimentación después del lavado y cierre el puerto en la sonda
6. Cierre la tapa de la sonda de alimentación hasta la siguiente alimentación

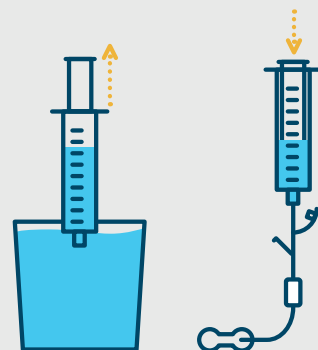

LAVADO DE LA SONDA DE ALIMENTACIÓN CON AGUA

Nota:



- Pregunte a su proveedor de atención médica sobre el cuidado del recipiente y el kit de alimentación entre administraciones
- Tape cualquier fórmula no utilizada, escriba la fecha en ella y guárdela en el refrigerador



- Deseche cualquier fórmula abierta, reconstituida o licuada sin usar después de 24 horas
- Deseche cualquier fórmula abierta preparada y sin usar que se haya almacenado en el refrigerador después de 48 horas




Se puede administrar agua adicional a través de la sonda de alimentación según sea necesario. Si sigue una dieta con restricción de líquidos, su proveedor de atención médica le dará recomendaciones para la ingesta diaria de líquidos. Use el cilindro de la jeringa como embudo y luego vierta agua en la jeringa.



La anterior información ha sido revisada y aprobada por la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral.

Visite anhi.org para obtener más recursos sobre la alimentación por sonda

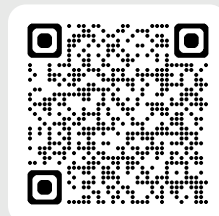

anhi.org | ©2024 Abbott
202419966 / Noviembre 2024 LITOGRAFÍA EN EE. UU.

